

iPAD CU-SP1

Erläuterung des LCD-Displays



Betriebsbereit und Funktionstüchtig

Ihr Defibrillator ist in Ordnung und im Notfall einsatzbereit



Handlungsbedarf

Ihr iPAD CU-SP1 ist betriebsbereit, aber es besteht Handlungsbedarf. Die Batterie Ihres Defibrillators hat die Kapazität von einem Viertel.

Maßnahme:

Geben Sie diese Information an Ihre AED-Beauftragte Person weiter.
Die Beschaffung einer neuen Batterie sollte in Kürze erfolgen.



Die Haltbarkeit der Defibrillationselektroden beträgt noch drei Monate.

Maßnahme:

Geben Sie diese Information an Ihre AED-Beauftragte Person weiter.
Die Beschaffung neuer Defibrillationselektroden sollte in Kürze erfolgen.



Sofortiger Handlungsbedarf

Ihr Defibrillator iPAD CU-SP1 hat eine Fehlfunktion festgestellt.

Maßnahme:


Setzen Sie unverzüglich Ihre AED-Beauftragte Person in Kenntnis.



Die Batteriekapazität ist niedrig. Ihr iPAD CU-SP1 ist einsatzbereit.

Maßnahme:

Setzen Sie unverzüglich Ihre AED-Beauftragte Person in Kenntnis.
Die Beschaffung einer neuen Batterie sollte sofort erfolgen

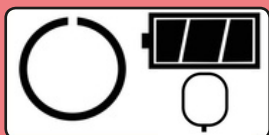

Die Haltbarkeit der Defibrillationselektroden ist überschritten. Ihr iPAD CU-SP1 ist einsatzbereit.

Maßnahme:

Setzen Sie unverzüglich Ihre AED-Beauftragte Person in Kenntnis.
Die Beschaffung neuer Defibrillationselektroden sollte sofort erfolgen.

Vertrieb und Service

MED-GT GmbH
Guerickestr. 14
33334 Gütersloh

Service-Telefon

05241 / 2305276

Fax: 05241 / 2305274

email: info@med-gt.de

Beauftragte Person

Name

Telefon